

3M独自のVMSテクノロジー

3種類の接着成分の配合バランスを最適化！
歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん、
様々な被着体にワンステップで使用可能です。

— 歯質 —

— 修復材料 —

V

Vitrebond™
Copolymer
ビトラボンド コポリマー

象牙質

M

MDP monomer
MDPモノマー

象牙質

エナメル質

金属

ジルコニア

アルミナ

S

Silane
シランカップリング剤

ガラス
セラミックス

コンポジット
レジン

ビトラボンド コポリマー

水分コントロールが困難な部位でも安定した接着性能を発揮

MDPモノマー

- ・セルフエッチ時に高い接着性能を発揮
- ・象牙質、エナメル質、金属、ジルコニア、アルミナに高い接着性能を発揮
- ・室温下でも液の性能が安定

シランカップリング剤

歯科用ガラスセラミックスに対して化学的な接着性能を発揮

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブで日常の診療をシンプルにしませんか？

ベース・ライナーの前処理

フィルテック®フィルアンドコアフロー
コンポジットレジンとの組み合わせで
重合収縮応力を低減させた裏層が可能！

CR充填

術後疼痛発生率は0.06%
(3M社内調査による)

フィルテック®シューブリーム
ウルトラコンポジットレジン



フィルテック®フィルアンドコア
フロー コンポジットレジン

ボネンテック材

ボネンテック材

シーラント時の前処理

水洗不要なので、より短時間で
処置できます。
エッチングが苦手な患者様などに。

クリンプロシーラント



シーラント
前処理材

不要な材料

各種リペア

被着面に歯質・金属・ポーセレンなどが複数混在していても
塗り分け不要でこれ1本！

スコッチボンド™
ユニバーサル
アドヒーズブなら
**1本で
多用途！**

レジンセメントの前処理

リライエックス™アルティメットレジンセメントとの
組み合わせであれば、歯質側も補綴物側も前処理材はこれ1本！
あらゆる被着体に高い接着力を発揮！

リライエックス™アルティメット
レジンセメント




セラミック
前処理材

金属
前処理材

コンポジット
前処理材

ジルコニア
前処理材

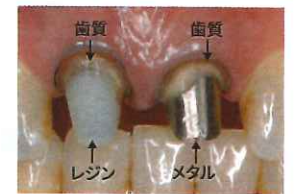

写真提供：北海道が開業 関俊也先生

コア築造部分の前処理

支台築造用レジンとしても用いることが可能な
フィルアンドコアと残存歯質、ファイバーポスト、
レジンセメントを強固に一体化します。

フィルテック®フィルアンドコア
フローコンポジットレジン

リライエックス™
ファイバーポスト



ボネンテック材

ボネンテック材

抑制材
知覚過敏

知覚過敏症の処置

保険治療が可能。
開口した象牙細管を即時封鎖します。

リライエックス™ユニセム2
オートミックス
歯科接着用レジンセメント

販売名:スコッチボンドユニバーサルアドヒーズブ 認証番号:224AKBZX00054000 / 販売名:フィルテックフィルアンドコアフローコンポジットレジン 認証番号:229AKBZX00030000
販売名:フィルテックシューブリームウルトラフローコンポジットレジン 認証番号:222AKBZX00110000 / 販売名:フィルテックシューブリームウルトラコンポジットレジン 認証番号:221AKBZX00174000
販売名:リライエックスアルティメットレジンセメント 認証番号:225AKBZX00136000 / 販売名:リライエックスユニセム2オートミックス 認証番号:223AKBZX00006000
販売名:リライエックスファイバーポスト 認証番号:228AKBZX00013000 / 販売名:クリンプロシーラント 認証番号:222AKBZX00098000

スリーエム ジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web

3M 歯科

Q

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年12月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3M、スコッチボンド、フィルテック、リライエックス、クリンプロ、Vitrebondは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1633-AJ (121880) PN/e.

3M コールセンター ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。